

GLOSAIR™

# Konsept 100% automatisert

Avansert  
desinfeksjonsteknologi

Glosair er  
et varemerke  
tilhørende

  
OXY PHARM®





# BESKYTTER DITT MILJØ MOT PATOGENE MIKROBER

## Klar til bruk!

GLOSAIR desinfeksjonssystem fra Oxy'Pharm er 100% automatisert og kombinerer diffusjonsmaskinen GLOSAIR med det biologisk nedbrytbare GLOSAIR 400.

Luftbåren overflatedesinfeksjon gjør det mulig å behandle overflater som ofte er utilgjengelige eller komplekse i sin form. Systemet sikrer en jevn fordeling av desinfiserende produkt på alle overflater i hele rommet.

Luftbåren overflatedesinfeksjon med GLOSAIR er effektiv på virus, bakterier, sopp, sporer og sopp.

## GLOSAIR 400






GLOSAIR 400 er klar til bruk, bio-desinfeksjon beregnet på overflater. GLOSAIR 400 er basert på 6 % hydrogenperoksid, er 99,9 % biologisk nedbrytbart og etterlater ingen rester på flater etter behandling.

GLOSAIR 400 er ikke giftig, ikke allergifremkallende, ikke etsende for overflater (inkludert elektroniske overflater) og trygt for miljøet.

*Kan kun brukes sammen med GLOSAIR™-systemet.*



## Fordeler

-  Biologisk nedbrytbar
-  Ikke toksisk
-  Ikke korrosivt
-  Ingen rester
-  Ikke allergent

HD berørings skjerm



Ventilasjons-  
system

Plass til  
oppbevaring



## GLOSAIR SYSTEMET™

GLOSAIR-maskinen er basert på konseptet med en oppvarmende- og ioniserende turbin som muliggjør spredning av det flytende desinfiserende produktet i form av gass, og man unngår dermed risiko for korrosjon av overflater.

Overflatedesinfeksjon er gjort så enkelt som mulig takket være berørings skjermen som lar deg hente fram pre-programmerede rom. Muligheter for å justere volumet på rommet som skal behandles fra 10 til 2000m<sup>3</sup> og muligheter for å utsette oppstart. Historien til tidligere behandlinger lagres i maskinen og er enkelt å konsultere .

- Produsert i Frankrike av Oxy'Pharm i henhold til ISO 13485-standarden
- Baktericid, virucid, sporicid, soppdrepende middel, mykobaktericid
- Samsvarer med standardene EN 17272 og NF T-72110
- I henhold til normene:

EN 13697	EN 13624	EN 13610
EN 13704	EN 13727	EN 14204
EN 14348	EN 14476	EN 14675
EN 1276	EN 1656	
EN 1650	EN 1657	


## Fordeler

-  **Praktisk**
-  **Robust**
-  **Programmerbar**
-  **Smart**



829, rue Marcel Paul  
94500 Champigny-sur-Marne  
France

+33 1 45 18 78 70  
info@oxypharm.net  
[www.oxypharm.net](http://www.oxypharm.net)

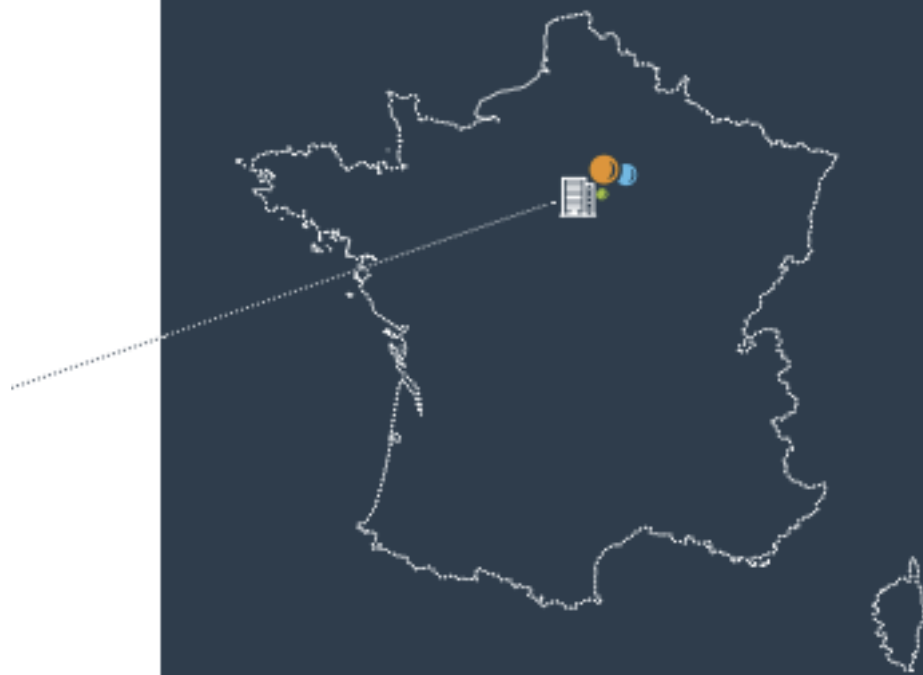

Din forhandler i Norge:



**Brage Medical AS**

Teglverksveien 47, 3057 Solbergelva

Epost: [info@bragemedical.no](mailto:info@bragemedical.no)

Telefon: 32 83 59 00