

C


CONFIANZA Pro / Conquest Pro

Confianza Pro og Conquest Pro er samme wire. De har bare fått ulike navn avhengig av hvilket geografisk område de leveres til.

Confianza wirene er stive wire med tip-vekt på 9 eller 12 gram. I tillegg er de ytre tre centimetrene av wiren smalnet ned (tapered) fra .014 til .009 tommer / fra 0,33 til 0,23 mm.

De er beregnet på å penetrere harde, kalkrike caps og lesjoner. De har ikke dobbel kjerne og er derfor lite styrbare. Noen bruker bare forkortelsen «CP» når de omtaler Confianza Pro wiren.



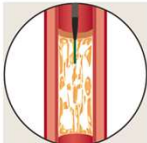

Frontline Guidewire for
Calcified Penetration

Hydrophilic coated and tapered to 0,23 mm (0.009inch) at the tip. 9 and 12 g tip load. For penetration of calcification and proximal or distal thick, fibrous caps



	Tip load	Coating	Core	Ball tip	Ball tip coating	Diameter	Radiopaque tip	Jacket
CONFIANZA PRO								
CONFIANZA PRO 12		All other parameters equal to Confianza Pro (see above)						