


K

KNUCKLE


Teknikk hvor wiren skyves framover slik at den ytterste delen av wiren legger seg dobbelt (danner en «loop» eller «knuckle»). En «knuckle» som ligger subintimalt kan brukes til å forsere lange okklusjoner til - eller forbi distale cap, fordi den vil dissekere seg subintimalt, uten fare for å perforere karet. Eksempel på en god knuckle wire er Gladius MG PV.

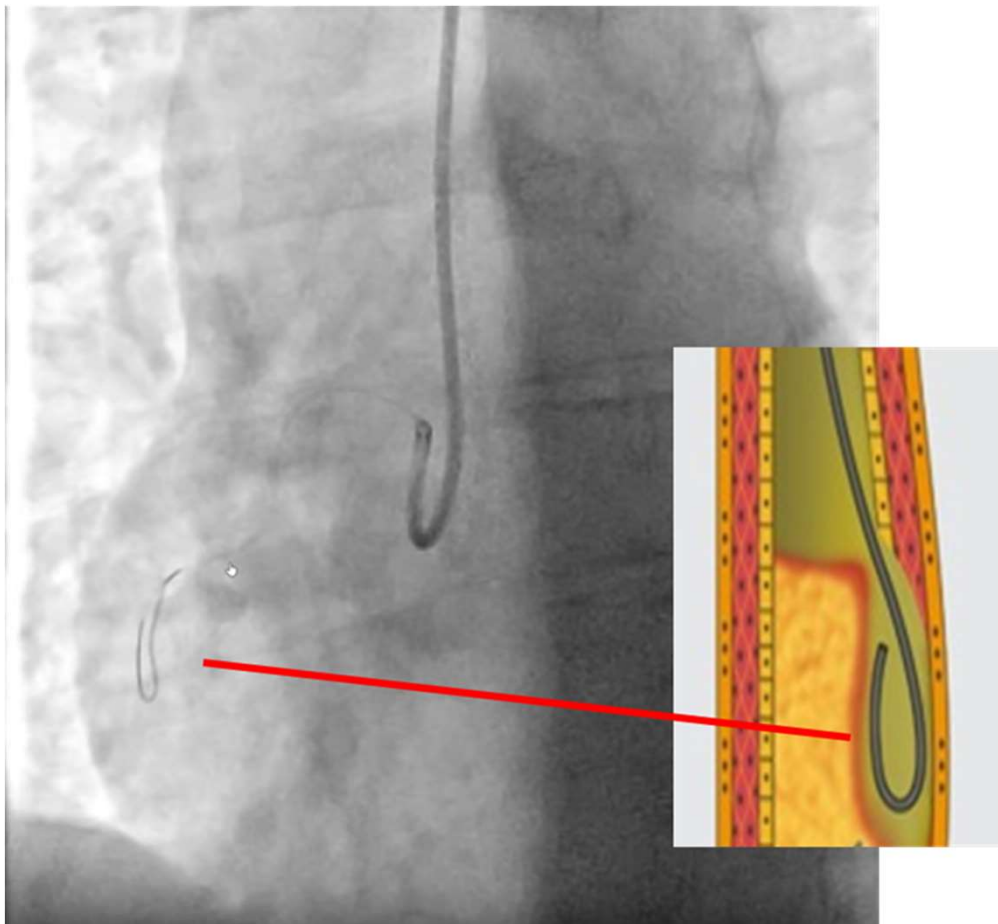

K

-> Power Knuckle

For å få ekstra kraft på knuckle-wire, kan man låse mikrokateteret med en oppblåst ballong. Dette kalles Power Knuckle teknikk.

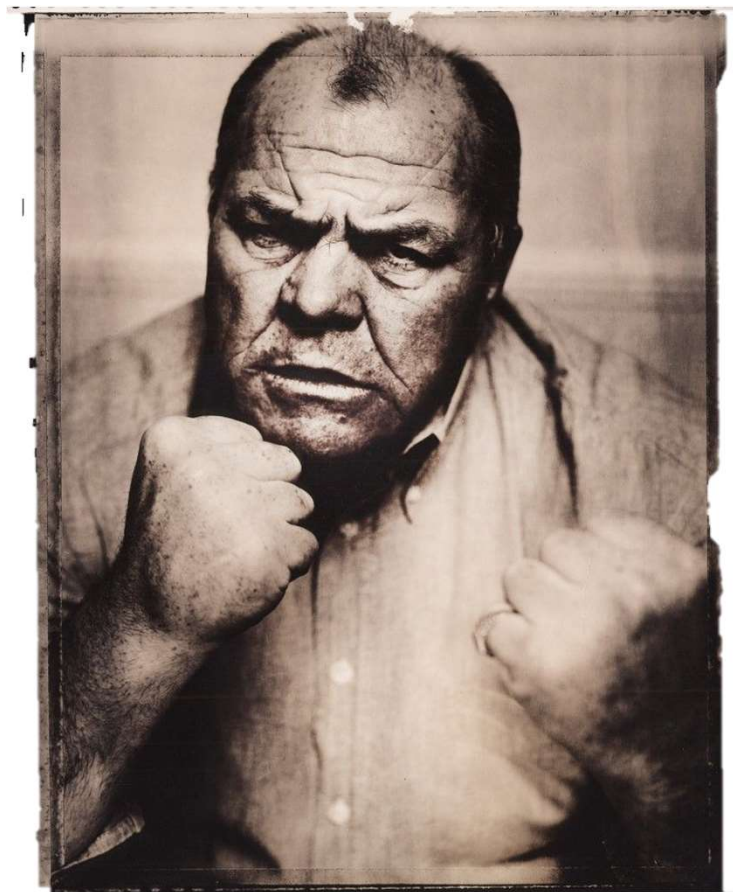

Bilde: Alternativ Power-Knuckle-teknikk.