


T

TRAPPING


Teknikk hvor en liten ballong inflateres inne i føringskateteret for å holde wiren på plass når en skifter mikrokateter eller annet utstyr.

Standard, liten ballong kan brukes, men det er utviklet egne trapping-ballonger som har en noe ruere overflate som griper bedre mot wire og i tillegg er utstyrt med et slankt leveringssystem for å oppta minst mulig plass i føringskateteret.

Alternativt kan man bruke en extension wire som forlenger en vanlig wire med 165 cm og gjør det mulig å bytte RX-katetre uten å miste posisjon.

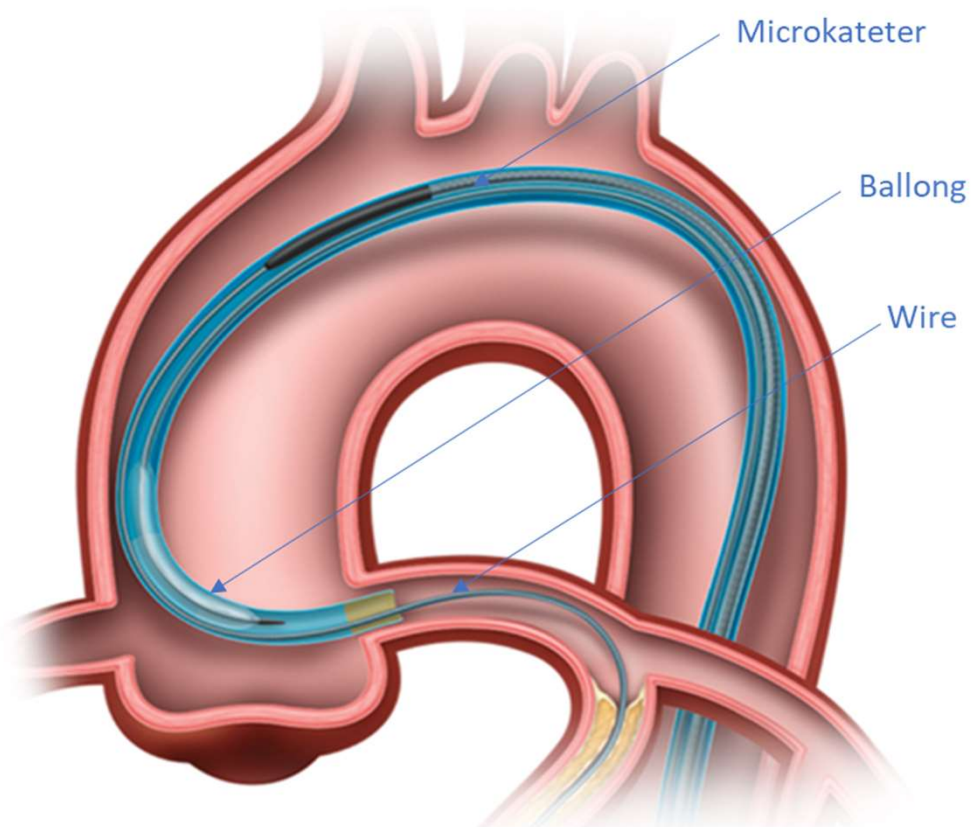

-> TRAPPING

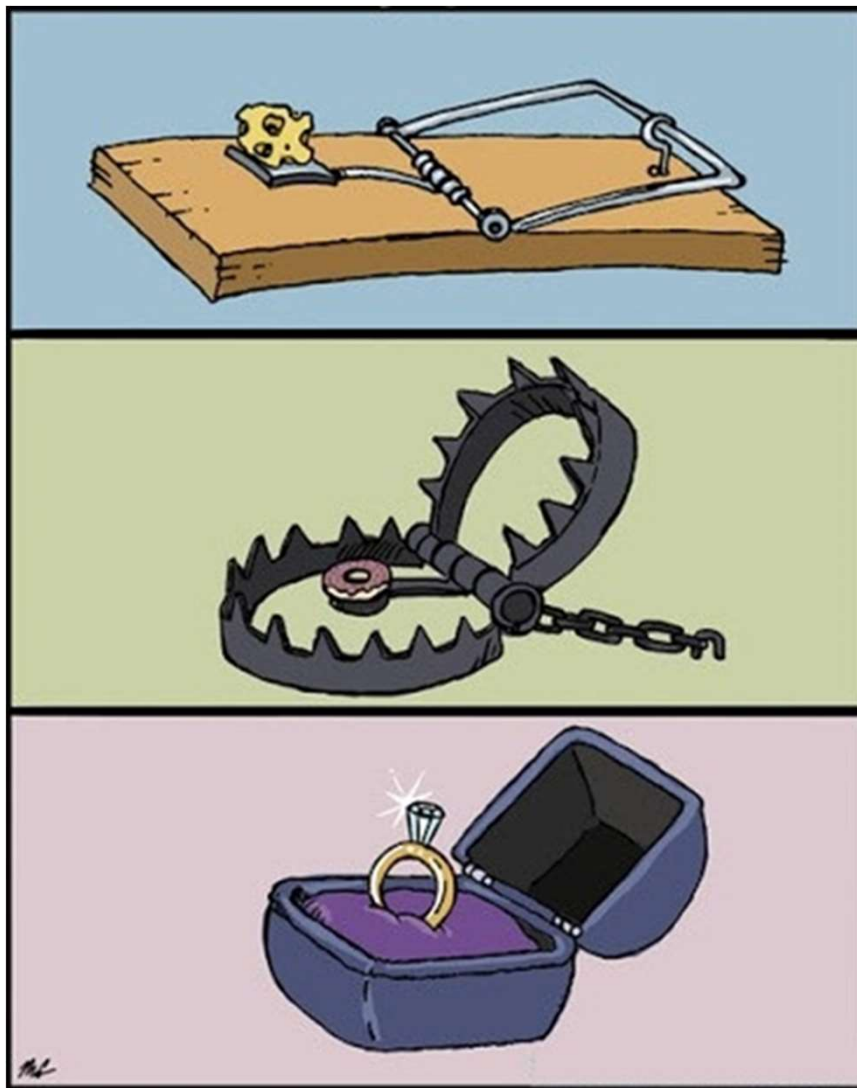

OTHER MAN-MADE TRAPS